





各部位名稱

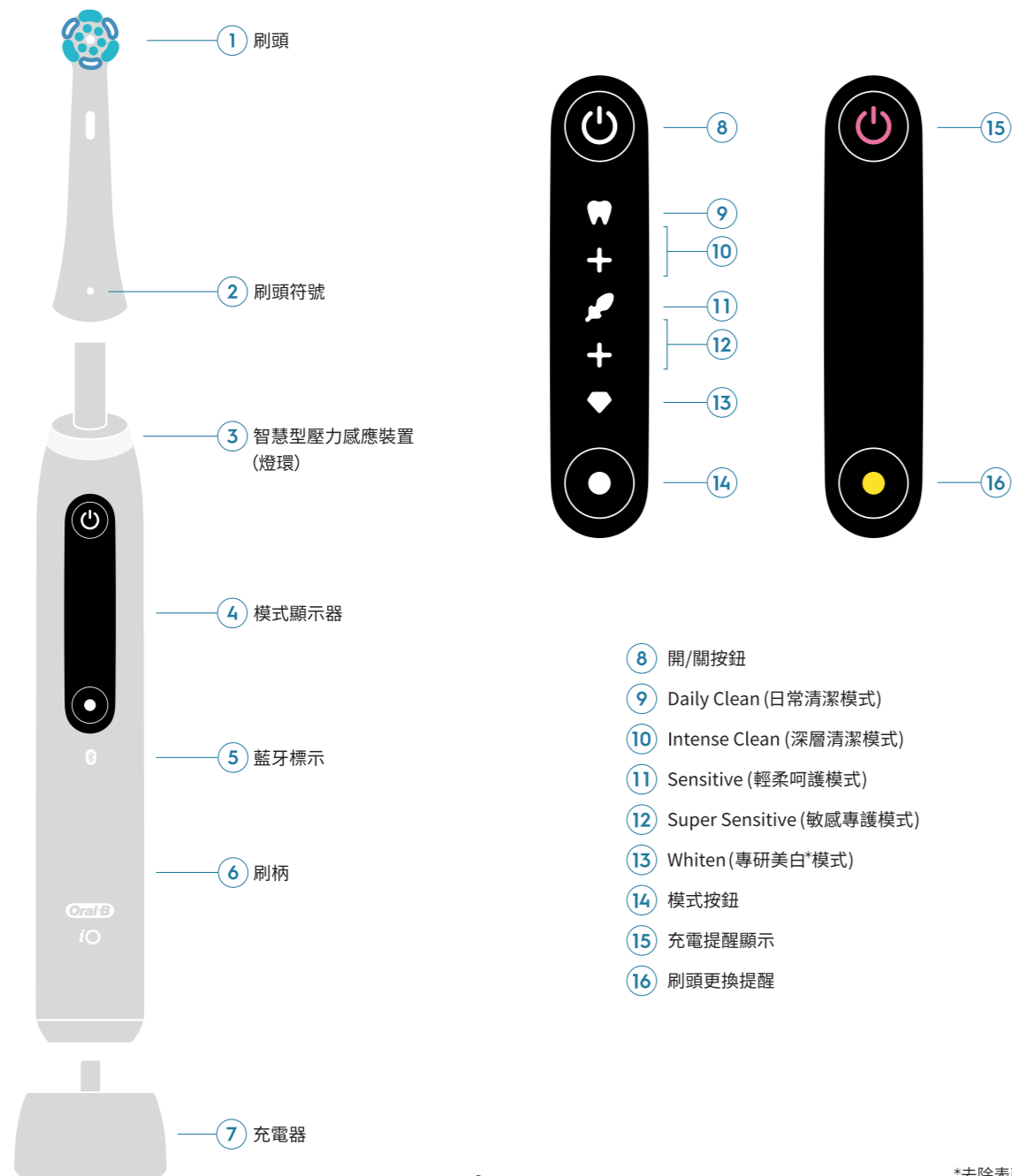

使用前，請務必詳閱以達正確使用。
請妥善保管封底上的保固書。

Charger Type 3757
Handle Type 3776

*去除表面牙漬

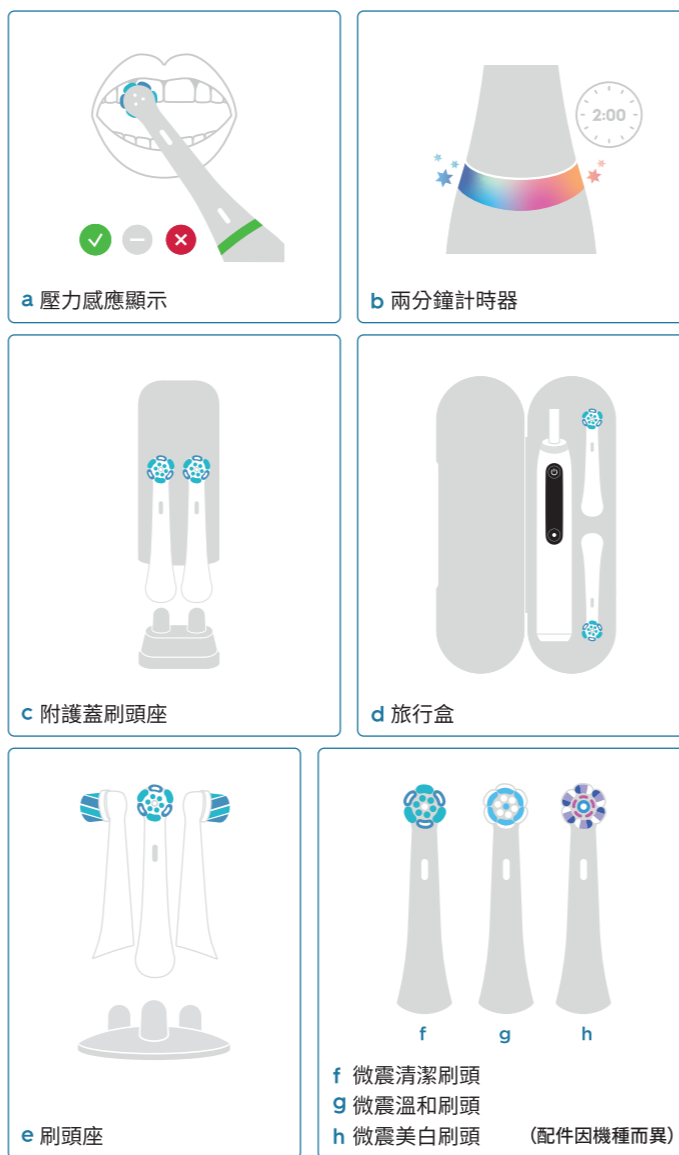

下載 Oral-B 應用程式並嘗試透過藍牙連接您的牙刷。


說明書內所有圖片僅供參考，具體以實物為準

2分鐘立即瞭解! 簡單用法指南

詳細請參閱說明書。

■ 使用前

- 首次使用和緊急使用時，只要充電30分鐘左右便可刷牙約2分鐘。
- 大約需要16小時才能飽電。
- 充電後，將刷頭插入刷柄，按下開/關按鈕後開始運作。

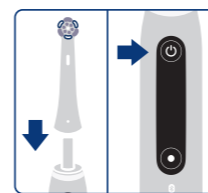


■ 刷牙前

- 擠出米粒般大小的牙膏量便足夠。
- 為避免牙膏飛散，請將刷頭放入口腔內再啟動開關，並於離開口腔前關閉開關。
- *關於正確刷牙方式，請參照次頁。



■ 保養方式

- 刷牙後，在刷頭套在刷柄上的狀態下朝下，利用流動的水將刷頭沖洗乾淨。
- 其後，請從刷柄卸除刷頭，再用流動的水沖洗乾淨。並將刷柄的水分擦乾。
- 因為刷柄使用的是不導電防水設計，即便刷柄沾水也無須擔心。

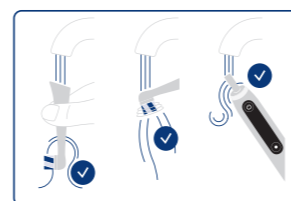




■ 關於更換刷頭

- 建議每3個月更換一次刷頭。
- 購買替換刷頭時，請就近洽詢 Oral-B 產品經銷商。
- 亦可上網訂購。

購買網站

2分鐘刷牙! 正確刷牙技巧

~ 正確刷牙，效果最佳! ~

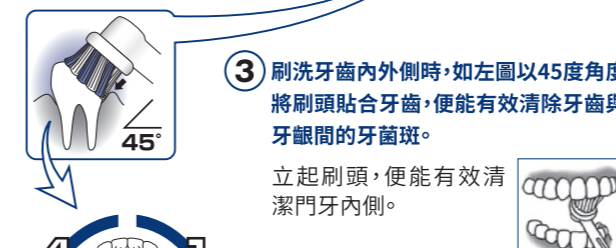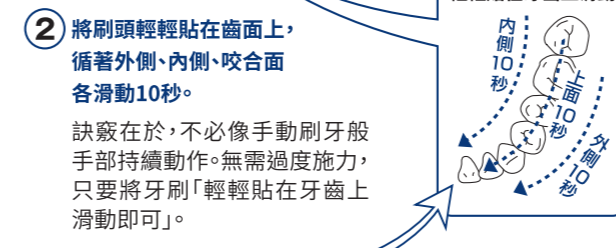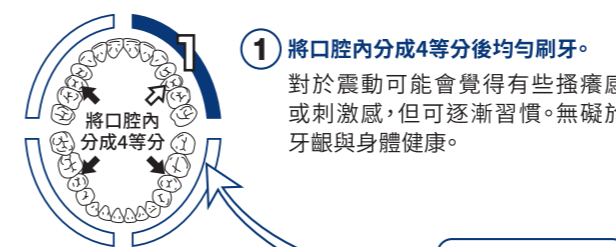

刷牙後，用舌尖滑過牙齒表面，便可感受到光滑潔淨感。
接下來若用手指摩擦牙齒表面，更可感受到牙菌斑有效被清除的光滑潔淨感。

為了讓顧客安全且有效體驗全新刷牙方式，而悉心製作 Oral-B iO 系列，使用時請確實確認安全相關注意事項，以達正確使用。

安全須知

- 使用前，請詳閱本「安全須知」以達正確使用。
- 在此所示注意事項用於安全且正確使用產品，以防對您或其他人造成危害或損害。此外，為了載明危險程度，故將注意事項區分如下。

以下任一項皆屬攸關安全的重要內容，故請務必遵守。

警告：有可能造成死亡或身負重傷的假設內容。
注意：有可能造成傷害及發生財物損失的假設內容。

閱讀過後，請務必保管於使用者可隨時取閱之處。

圖示例

- ⚠ 記號表示督促警告、注意內容。圖中的描繪表示具體的注意內容(左圖表示注意觸電)。
- 🚫 記號表示禁止行為。圖中或附近的描繪表示具體的禁止內容(左圖表示禁止分解)。
- 🔌 記號表示強制行為。圖中的描繪表示具體的指示內容(左圖表示從插座上拔除電源插頭)。

重要

- 請勿使用交流100-110V以外的電源。以防發生火災與觸電。
- 請勿損壞電源、勉強彎曲、拉扯、扭轉、捆束、接近高溫部、或放置重物、夾住或加工。以防電線破損、造成火災觸電。
- 當電線或插頭受損、或插座鬆動時請勿使用。以防觸電、短路、著火。
- 切勿改造。此外，非維修技術人員切勿進行分解與維修(為了廢棄產品，而取出充電式電池時除外)。以防造成火災、觸電、受傷。本產品內置包含不可更換的充電式電池，請勿打開拆解本產品。維修時請洽購買之經銷商。
- 切勿將充電器放置於水或液體中或淋水，或放置在可能掉落水中或拉入浴缸或洗手盆的位置。以防觸電、觸電、冒煙、著火、發生漏電火災或故障。
- 請勿在浴室、淋浴間等潮濕場所使用充電器。以防短路、觸電、冒煙、著火、發生漏電火災或故障。
- 請勿用潮濕的手，觸碰插頭或從插座上插拔電源插頭。以防觸電或受傷。
- 保養時請務必關閉開關，並從插座上拔出插頭。此外，充電器掉入水中時，切勿觸摸已掉入水中的充電器，請立即拔除電源插頭。以防觸電或受傷。

重要

- 異常或故障時，請立即停用。如產品/電源線損壞，請送至 Oral-B 服務中心。若繼續使用，可能造成火災、觸電、受傷和故障。請立即關閉開關，拔除插頭後，委託 Oral-B 維修中心進行檢修。
- 使用插頭時，務必完全擦乾電極部。以防短路、觸電、冒煙、著火、發生漏電火災或故障。

警告

- 切勿讓無人監護下的兒童清潔、單獨使用和維修保養本產品。此外，小零件可能會脫落，請放置在兒童無法觸及的地方。以防發生事故或受傷。兒童和由於身體、感官和精神原因行動不便者及缺乏使用牙刷經驗和知識的人群需要在有人監護和指導下安全地使用本產品，並了解可能存在的危險。
- 不適合3歲以下兒童使用。
- 切勿用於刷牙之外的其他用途。僅供刷牙使用。以防提早產品消耗，而發生事故。
- 勿讓插頭附着金屬、灰塵與水滴。為避免短路、觸電、冒煙、著火、發生漏電火災或故障，請定期清理。
- 請勿用力將牙刷刷壓在牙齦上。以防牙齦受損。牙周病嚴重的人士，請向牙科醫師諮詢。
- 請勿用於刷牙之外用途，如當成玩具玩耍或咬著牙刷。切勿當成玩具或在無成人監督下使用。
- 廢棄之際取出充電式電池時，請勿讓⊕/⊖端子短路。
- 使用前，確認刷頭有無開岔或變形。為了避免刷頭破損而可能產生小部件導致窒息的危險或損傷牙齒：每次使用之前，請確保刷頭合適牢固地裝在刷柄上。如果刷頭不再適合妥當地裝上，請停止使用牙刷。以防傷及牙齦和口唇。此外，請務必將刷頭安裝於刷柄後再使用。切勿在沒有刷頭的情況下使用。
- 正在接受牙科治療中、或使用假牙時，請於使用前先諮詢牙科醫師。
- 切勿將異物插入刷柄或充電器開口部。
- 僅可使用產品隨附的充電器。
- 切勿使用非 Oral-B 建議的配件。
- 拔除插頭時，切勿手持電線，請務必手持插頭前端後再拔除。以防觸電、短路、著火，而釀成火災。
- 本產品為「室內用」。
- 每三個月更換一支刷頭，如發現刷頭磨損，可提早更換。萬一毛尖開岔時，請立即更換。

警告

- 使用過後，請將刷頭沖洗乾淨。(詳細內容，請參閱〈使用後的保養方式〉) 可透過正確的保養方式，延長牙刷壽命和使用安全。
- 不使用充電器時，請從插座拔除電源插頭(長期不在時，更應特別注意)。以防受傷、燙傷或因絕緣老化而觸電、或發生漏電火災。

- ⚠ 請注意，切勿讓兒童把玩本產品。
- ⚠ 此產品屬個人清潔衛生產品，並非供牙科診所或醫院機構使用於多位使用者而設計。牙醫師請勿讓多位患者共用。基於衛生因素，全家人使用本產品時，建議每個家庭成員使用個人刷柄和刷頭。

重要通知

- Oral-B iO 電動牙刷刷柄、充電器及磁式收納包(配件) 含有鐵磁磁鐵，可產生磁場。如果您正在使用醫療儀器或有植入式醫療儀器，請向醫療儀器製造商或相關專業人士諮詢關於 Oral-B iO 電動牙刷的使用安全問題。
- 本產品可與智慧型手機相互連動。(詳細內容請參閱〈牙刷和智慧型手機的連動方式〉) 要避免電磁感應互相干擾及/或相容性衝突，在管制區內(如飛機上或醫院的特殊區域)使用本產品前，請先停止牙刷刷柄上的藍牙。
- 身上安裝了心臟起搏器的人士，必須時刻都與已啟動的電動牙刷保持15厘米(6吋)以上的距離。無論在任何時候懷疑出現了干擾情況，應立即停止電動牙刷的藍牙功能。

關於電器規格，請參照充電器背面。

規格

電源方式	充電式
充電時間	約16小時
額定	AC100~110V/50~60Hz/0.9W

充電方式

- 將充電器Ⓣ的電源插頭插入插座後，再將牙刷刷柄安裝於充電器上進行充電。
- 充電時間/開按鈕Ⓢ呈白色閃爍。充電時，開/關按鈕Ⓢ停止閃爍。充電電約需16小時。
- 剩餘電量低時，充電提醒顯示Ⓣ呈紅色閃爍。如果在使用過程中電池電量耗盡，牙刷將停止轉動。在這種情況下，請將其放上充電器充電。
- 隨時將刷柄安置於充電器上，可隨時維持充電的狀態。無過度充電的疑慮。但為了保護環境，我們建議僅在充電時將充電器電源插頭插入插座。
- 當外部環境超過使用範圍或電流過大時，牙刷本體的電源可能會自動關閉。在這種情況下，請將其放上充電器以重新啟用。
- 注意：● 本電動牙刷使用鋰電池，請避免在50°C以上高溫場所使用和保存。● 為了保護充電式電池的耐用壽命，請保存於常溫環境。

